

# REVYLINE


## RL 050

### Электрическая звуковая зубная щетка

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

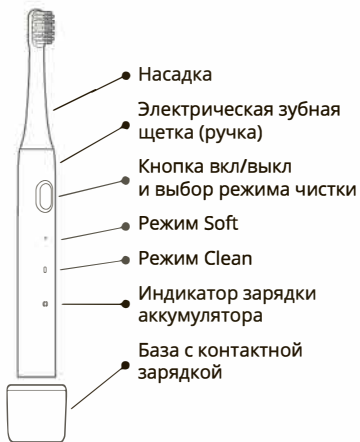

#### Меры предосторожности

Перед первым применением щетки Revyline RL 050 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съёмные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
13. Не следует хранить щетку на зарядной базе, по окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.

14. Электрическую зубную щетку Revyline RL 050 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
15. Не рекомендуется для использования детьми до 6 лет.
16. Детям от 6 до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
17. Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
18. Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.
19. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей, в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7°C и не выше +40°C.
20. Утилизация прибора и его встроенного аккумулятора должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

#### Предупреждения медицинского характера

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более 1 недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использо-

вания данного устройства следует проконсультироваться с врачом. Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

#### Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется на базе с подключением электропитания по проводу USB Type-C.

Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.

Перед тем как установить щетку на зарядную базу, проверьте, сухая ли контактная часть у ее основания. Установите щетку на базу зарядного устройства и убедитесь, что питание подключено.

При зарядке на базе индикатор мигает. Если при зарядке индикатор перестает мигать, значит батарея полностью заряжена.

Если батарея разряжена, то во время использования индикатор батареи мигает в течение нескольких секунд, а затем отключается.

Щетка работает до 120 минут от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин. в течение 30 дней).

В случае если щетка долго не использовалась, световой индикатор зарядки загорается не сразу.

Если вы не пользовались щеткой 6 месяцев и более, то перед возобновлением использования следует полностью зарядить аккумулятор.

**Внимание!** Не подзаряжайте устройство между чистками. Производите зарядку аккумулятора тогда, когда уровень заряда становится низким.

#### Включение прибора

1. Вставьте насадку в рукоятку.
2. Намочите щетину и нанесите небольшое количество зубной пасты.
3. Поместите головку щетки в рот, чтобы избежать разбрызгивания пасты во время начала работы.
4. Один раз нажмите на кнопку управления.

#### Выбор режима чистки

Выбора режима (активация/деактивация) осуществляется удержанием кнопки в течение 5 секунд, сопровождается трехразовым миганием всех светодиодов.

Электрическая зубная щетка Revyline RL 050 позволяет использовать два режима работы:

**SOFT** – бережный уход за деснами: идеально подходит для утренней чистки.

**CLEAN** – тщательная очистка: рекомендован для вечерних процедур.

Переключение режимов производится нажатием кнопки управления. Каждое нажатие приводит к последовательной активации нового режима. Включенный световой индикатор соответствует режиму, который используется.

#### Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность

насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки. Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

#### Процесс чистки

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и основным корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.

Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. Встроенный таймер уведомит вас о смене зоны чистки коротким прерыванием колебаний щетины после 30 секунд работы. После четырех 30-секундных интервалов щетка отключится автоматически.

Во время чистки не следует надавливать на чистящую головку слишком энергично.

После завершения чистки тщательно

прополощите полость рта чистой водой.

#### Уход за зубной щеткой

Регулярно очищайте зубную щетку Revyline RL 050. Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе. Не трите щетину, чтобы не деформировать ее. Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью. Не погружайте зубную щетку в воду. Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше 40°C.

#### Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки Revyline RL 050 стандартная сменная насадка.

**Внимание!** Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

#### Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

#### Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие:

• применения их не по назначению;

• неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждению; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);

• нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.

- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.

- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров, посторонних предметов и жидкостей.

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

#### Комплектация:

- Основной блок щетки.
- Сменная насадка – 1 шт.
- База с контактной зарядкой.
- Провод USB Type-C.
- Инструкция по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Модель: RL 050.**

**Предназначена для эффективной чистки зубов.**

**Частота колебаний щетинок: 16 000–19 000 в мин.**

**Материал корпуса: ABS-пластик.**

**Питание: аккумулятор литий-ионный 350 mAh.**

**Влагозащита: IPX7.**

**Время полной зарядки: 3 ч.**

**Время работы на одной зарядке: до 30 дней.**

**Гарантия: 2 года.**

**Произведено по заказу ИП Барсовой Н. Э., г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 152/2.**

**Изготовитель: Shantou Honglong Industrial Co., Ltd. Beihuang South, Yiyang, Xiashan Town, Chaonan District, Shantou, Guangdong 515144, China**

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации \_\_\_\_\_

Место продажи \_\_\_\_\_

Место для печати